




LA PERFECTA COMBINACIÓN ENTRE **ESTÉTICA Y FUNCIÓN**

Creamos un sistema de articulación
verdaderamente único


Ofreciendo productos innovadores de calidad y un servicio
al cliente excepcional durante más de 30 años.

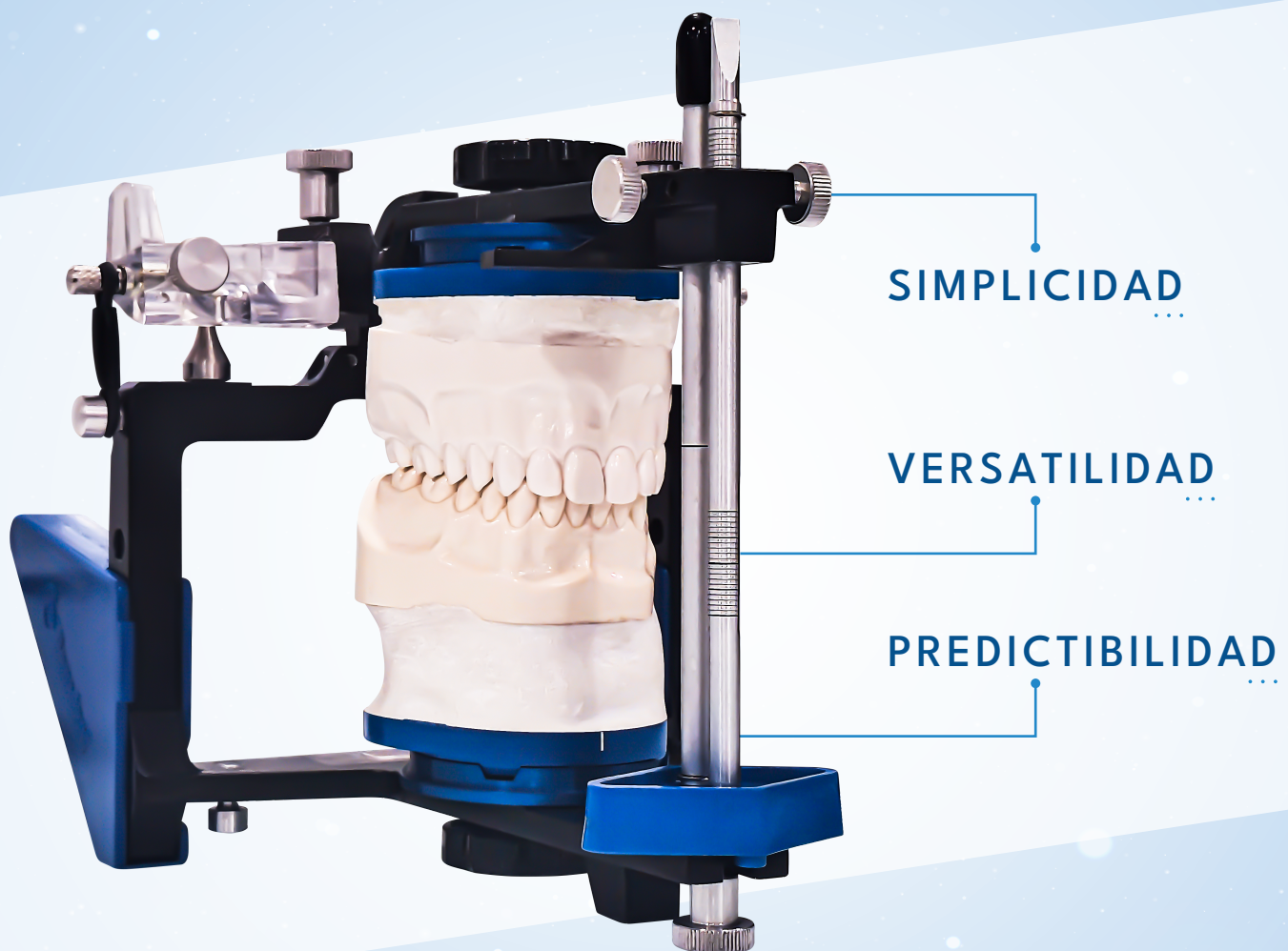

XBD

Distribuidor Oficial en México de Panadent

MATERIAL EDUCATIVO

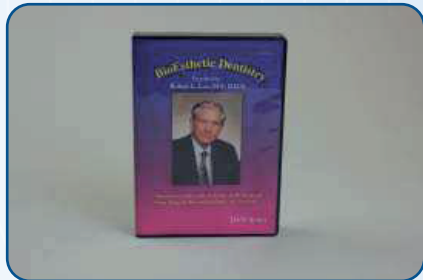

BDDVD-6
BioEsthetic Dentistry DVD Series

Conferencia presentada por el Dr. Robert Lee, expone su concepto de Odontología Bioestética. Esta serie aborda temas como la relación entre forma y función, diseño de sonrisa, el plano estético frente al plano funcional, observaciones sobre dentaduras duraderas y sin problemas. La serie consta de 6 DVD de 2 horas cada uno.




5954 EM
The Function of Teeth

El libro y CD "Función de los dientes" abarca la investigación del Dr. Lundeen y el Dr. Gibbs sobre los movimientos de la mandíbula y correlaciona su investigación con la del Dr. Lee sobre los movimientos de la mandíbula y cómo estos movimientos se relacionan con los articuladores.




5053 EM
Basic Articulator System CD

Este vídeo abarca los procedimientos básicos del módulo. El Dr. Lee muestra la transferencia del arco facial, los registros interoclusales céntricos y protrusivos, el montaje de modelos en el articulador y el ajuste del mismo. El DVD tiene una duración aproximada de 1 hora.

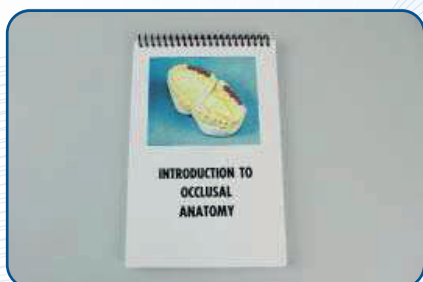

5952 EM
Introduction to Occlusal Anatomy

El manual de encerado "Introducción a la anatomía oclusal" ayudará a comprender por qué las superficies oclusales de los dientes tienen ciertas formas, relacionando los dientes opuestos entre sí para lograr una eficiencia y estabilidad óptimas de la masticación.

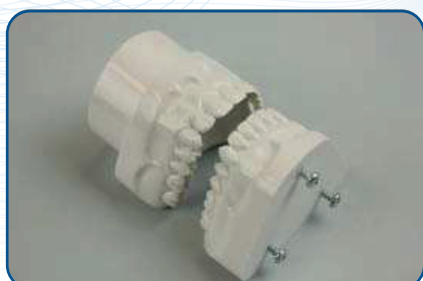

2605 EM
Bio-Esthetic Study Models (Class I)

2625 EM
Bio-Esthetic Study Models (Class II)

Los estudio se basan en observaciones del Dr. Lee sobre la dentición natural duradera y sin problemas, fueron encerados y esculpidos por Mick Illich, técnico de laboratorio del Dr. Lee durante años. Moldeados en resina blanca, son guías de tratamiento oclusal para dentistas, ortodoncistas, técnicos de laboratorio y estudiantes de odontología, así como para la educación del paciente.

PRODUCTOS DENTALES



3001 DP
Módulo ProxiFit™

ProxiFit™ simplifica y mejora el ajuste interproximal de coronas, onlays, inlays y carillas, mostrando dónde y cuánto ajustar. Las pinzas de sujeción mantienen cintas de prueba de Mylar precortadas e individuales a 90° con respecto a las troneras interproximales. Las cintas son ultrafinas (0,0007") y están cubiertas con tinte que marcan los contactos interproximales.



3050 DP
ProxiFit™ Cintas de test (2 Pkg. Black)

3055 DP
ProxiFit™ Cintas de test (2 Pkg. Red)

3060 DP
ProxiFit™ Cintas de test (1 Pkg. ea.)

Cada caja contiene 120 cintas de prueba precortadas, protegidas y de doble cara, en color negro o rojo, con un grosor de 0,0007 pulgadas (17 micras). Estas cintas de marcado higiénicas y prácticas se utilizan con el fórceps Proxi-Fit para marcar con precisión los contactos interproximales densos de las restauraciones que se están colocando.



4405 DP
Discos compuestos Bite-Tab™ (180)

Las Bite-Tabs™ están fabricadas con compuesto de impresión rojo depositado sobre tiras autoadhesivas.

Las Bite-Tabs™ se pueden usar con la mayoría de las marcas de tenedores de mordida.



4410 DP
Horquilla estabilizadora de mordida (60)

Los estabilizadores de horquilla se colocan en la parte inferior para que los dientes inferiores puedan apoyarla contra los superiores. Es un material esponjoso con adhesivo en un lado para fijarlo a la parte inferior de la horquilla.

Los estabilizadores son compatibles con cualquier sistema de arco facial que utilice una horquilla.



7172
Placas de registro DP•Bite-Tray™ (20)

7175
Placas de registro DP•Bite-Tray™ (50)

Las placas de mordida Bite-Trays™ están fabricadas en aluminio blando y están diseñadas para obtener registros interoclusales precisos de la posición mandibular. Son excelentes para tomar registros céntricos, protrusivos y de borde lateral. Estas placas se pueden utilizar con cualquier material de registro de mordida que se desee.



9390 DP
Hojas de calibración (numerado)

CLaminas de calibración hechas de poliéster y numeradas (1-56) en aumentos de 1/10 mm para mayor comodidad. Se utilizan como desprogramador anterior para tomar registros céntricos y se pueden usar en procedimientos de equilibrio o coronaplastia.



9391 DP
Regla Multi-Medición

Esta regla puede medir longitudes y anchuras dentales, sobremordida vertical y horizontal, además de contar con escalas de apertura y rango de movimiento lateral.



9395 DP
Calibrador de proporción dorada

Está diseñado para ayudar a determinar las dimensiones orofaciales así como las dimensiones verticales, la posición del borde incisal y el ancho de los dientes. Está calibrado para corresponder al principio de la "Proporción Áurea" (1:1,618) y se considera útil para lograr resultados estéticos.



4330 DP
Guías enceradas de proporción aurea (Set of 7)

Las guías de encerado de proporción áurea pueden utilizarse con la plataforma ajustable Kois o por sí solas para facilitar la incorporación de la proporción áurea de 1:1,618 para el ancho de los dientes en restauraciones anteriores.



4350
Guías dentales transparentes (Set de 3)

Las guías dentales transparentes están hechas de bloques de acrílico transparente y se pueden utilizar para evaluar la forma del diente, el borde incisal y los contornos gingivales.



4500 DP
Starter Kit "Smile Now"
(Set de 8)

Las plantillas dentales instantáneas Smile Now están fabricadas en plástico flexible con adhesivo de fácil aplicación. El starter kit incluye los cuatro tamaños en tonos Bleach y B1.



3100 DP
Bloques de entrenamiento de corona completa

Los bloques de entrenamiento de corona completa están fabricados en resina dura. Ayudan a desarrollar la coordinación mano-ojo mediante la práctica de ocho diseños de preparación diferentes. Incluyen ocho bloques rectangulares, cinco bloques circulares y una herramienta de retroalimentación.



1750 DP
Analizador oclusal (Humo)

El analizador oclusal está fabricado en plástico duro. Se utiliza para evaluar el plano oclusal de los modelos de estudio o de la prótesis dental.



2660 DP
Modelos de mordida edéntulos

Los modelos edéntulos están hechos de resina e incluyen un registro de mordida. Se utilizan para simular a un paciente edéntulo y se pueden montar en cualquier articulador.

SISTEMAS MODULARES DE ARTICULADOR



1250 AS Módulo Kois con Articulador PCH

Incluye:

- 2094 AA Patas de soporte
- 4300 KS Sistema analizador dentofacial Kois
- Incluye:**
- 4305 FB Analizador dentofacial Kois
- 4360 FB Plataforma ajustable Kois
- 2280 ME Soporte de montaje mandibular
- 4405 DP Discos compuestos Bite-Tab™

Los módulos Kois incluyen todos los elementos esenciales necesarios para montar los modelos al utilizar el analizador dentofacial Kois.

Incluye:

- 2094 AA Patas de soporte para articulador (juego)
- 4000 FB Arco facial Pana-Mount™
- 4070 FB Nivel Bio-Esthetic™
- 8210 AA Estuche de plástico moldeado
- 2280 ME Soporte de montaje mandibular
- 2850 MP Sistema Magna-Split™ II
- 7172 DP Placas de registro Bite-Tray™ (20)
- 4405 DP Discos compuestos Bite-Tab™ (180 discos)
- 4410 DP Estabilizadores Bite-Fork (60)

El módulo básico incluye los elementos esenciales para el montaje del arco facial Pana-Mount™. El estuche de plástico protege el articulador, el arco facial y los accesorios, además de espacio para los modelos montados. El módulo básico viene con analógicos de movimiento de 1,5 mm.



1210 AS Módulo básico con Articulador PCH
1211 AS Módulo básico con Articulador PSH



1230 AS Módulo avanzado con Articulador PCH
1231 AS Módulo avanzado con Articulador PSH

Incluye:

- 2094 AA Patas de soporte para articulador (Set)
- 4000 FB Arco facial Pana-Mount™
- 4070 FB Nivel Bio-Esthetic™
- 8210 AA Estuche de plástico moldeado
- 2280 ME Soporte de montaje mandibular
- 7172 DP Placas de registro Bite-Tray™ (20)
- 4405 DP Discos compuestos Bite-Tab™ (180 discos)
- 4410 DP Estabilizadores de horquilla Bite-Fork (60)
- 7600 AP Grabador Axi-Path III (Ejes con ajuste macro-micro)
- 2250 ME Sistema de montaje de ejes
- 2804 MP Placa de montaje Magna-Split™ (para AMS)
- 2850 MP Sistema Magna-Split™ II
- 2105 AA Analógicos de movimiento de 0,5 mm
- 2110 AA Analógicos de movimiento de 1,0 mm
- 2120 AA Analógicos de movimiento de 2,0 mm
- 2125 AA Analógicos de movimiento de 2,5 mm

El módulo avanzado incluye los elementos del módulo básico, grabadora Axi-Path III y montajes de ejes. Incluye el juego completo de movimientos análogos (0,5, 1,0, 1,5, 2,0 y 2,5 mm).

ARTICULADORES



Incluye:
1701 AR
Articulator Modelo PCH

1610 AR
Articulator Magnético Modelo PCH

El modelo PCH es un articulador de precisión que permite la transferencia de modelos dentales de un articulador PCH o PSH a otro. El modelo PCH cuenta con un pasador curvo calibrado en grados. El modelo **1610 AR** incluye 20 placas de montaje magnéticas y una llave hexagonal.

Incluye:
1801 AR
Articulator Modelo PSH

1620 AR
Articulator Magnético Modelo PSH

El articulador modelo PSH es un articulador de precisión que permite la transferencia de modelos dentales de un articulador PSH o PCH a otro. El modelo PSH incluye un pasador incisal recto calibrado en milímetros. El modelo **1620 AR** incluye 20 placas de montaje magnéticas y una llave hexagonal.




Incluye:
1650 AR
Articulator Magnético Modelo PCF

El articulador modelo PCF es un articulador de precisión con analógicos fijos de 1,5 mm ajustados a 20°, un sistema magnético instalado y un pin incisal curvo calibrado en grados. El modelo **1650 AR** incluye 10 placas de montaje magnéticas.



ACCESORIOS PARA ARTICULADORES

Trayectorias análogas del movimiento del eje condilar de Panadent

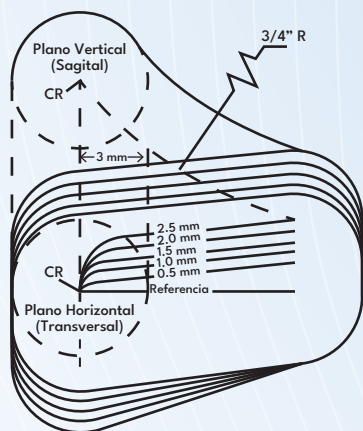

Esquema de los movimientos análogos que muestra la variación en trayectorias curvas de Bennett, en rango funcional de 3 mm con relación céntrica. Los movimientos análogos se crearon con una pared superior de 3/4 de pulgada de radio y trayectorias orbitales de 6°.

Distribución de los Movimientos de Bennett Inducidos por Operador

Milímetros por lado	.25	.5	1	1.5	2	2.5
Percent (%) de pacientes	2	15	52	21	8	2

* Movimientos de borde medidos en el lado no operativo, línea de avance de 3 mm planos vertical y horizontal desde la relación céntrica

Gráfico de distribución de 440 movimientos laterales registrados con el pantógrafo de investigación Lee.




- 2105 AA 0,5 mm Movimiento análogo
- 2110 AA 1,0 mm Movimiento análogo
- 2115 AA 1,5 mm Movimiento análogo
- 2120 AA 2,0 mm Movimiento análogo
- 2125 AA 2,5 mm Movimiento análogo

Disponibles en tamaños de 0,5 mm a 2,5 mm, en incrementos de 0,5 mm, los Análogos de movimiento representan todas las trayectorias, incluidas las trayectorias que limitan en los cóndilos de la fosa.



1105 AA
0.5 mm Movimiento análogo (Clear)

Disponibles en 0,5 mm a 2,5 mm, en incrementos de 0,5 mm, los Análogos representan todas las trayectorias, incluidas las trayectorias que limitan en los cóndilos de la fosa.

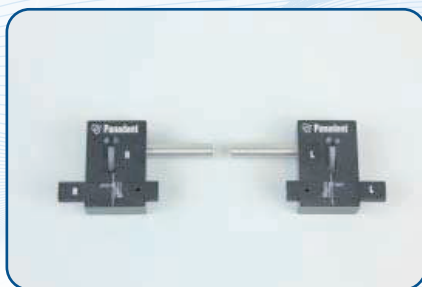

1105 AA
Set de selectores análogos

Los selectores análogos se utilizan junto con las mordidas de control laterales para determinar la cantidad de movimiento de Bennett y seleccionar el análogo de movimiento adecuado para cada paciente. Miden de 0 a 3 mm de Bennett por lado.




1105 AA
Set de posicionadores condilares

Los posicionadores condilares se usan para fabricar férulas de colocación y simular cirugías. Cuentan con dos líneas de ajustes de tornillos para apretar verticales y horizontales, además de un mecanismo de ajuste lateral.



2170 AA
Sistema indicador de posición de eje (API)

El sistema de posición del eje se usa para llevar estabilizar los cóndilos durante la terapia con férulas y determinar las discrepancias CR/CO (deslizamiento vs. punto de apoyo) para la verificación del registro interoclusal.

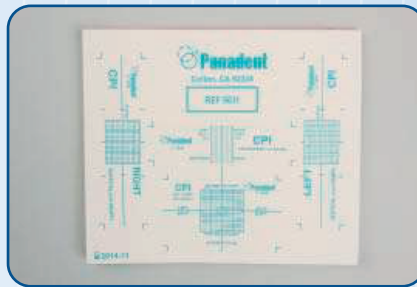

9611 AA
Papel milimétrico API (Set de 20)

El papel milimétrico API se utiliza con el sistema de indicadores de posición de ejes. Está impreso en papel desprendible para facilitar su extracción del bloc y su colocación en los soportes del gráfico.



1770 AA
Mesa incisal ajustable (PCH)
1780 AA
Mesa incisal ajustable (PSH y SH)

Se puede ajustar y configurar en varios ángulos incisales y laterales para simular la guía incisal y canina y ayudar en la fabricación de prótesis removibles.



1760 AA
Analizador del plano oclusal de Broadrick

Se utiliza para analizar la curva de Spee y desarrollar una buena curva de oclusión. Una bandera o semáforo es común en odontología y se ha descrito en numerosas ocasiones en escritos y procedimientos de enseñanza a lo largo de los años.



2090 AA
Columna de prueba del articulador
2890 AA
Columna de prueba magnética del articulador

Se usa para probar la precisión de los modelos PCH y PSH. La columna puede enviarse a laboratorio para comprobar la compatibilidad de su articulador.




8210 AA
Estuche de plástico moldeado

Estuche de alta resistencia para transportar el articulador, arco facial, soporte de montaje mandibular, placas de montaje y modelos de diagnóstico, con espacio adicional para otros materiales complementarios.



2094 AA
Soportes para articulador

Permite inclinarlo 45° hacia atrás y ofrece visión directa. Facilita el trabajo de técnicos de laboratorio, odontólogos en los procedimientos de diagnóstico y fotografía. Son esenciales para la educación del paciente en las consultas.

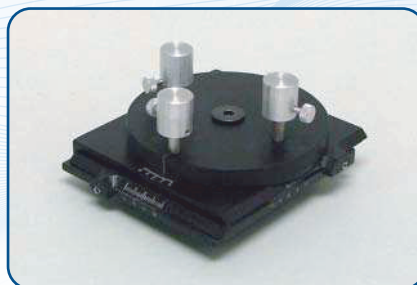


2335 AA
Relator de Cirugía Modelo

Se acopla a la placa de montaje inferior y permite indexar la posición de los moldes montados. Los moldes no montados pueden ajustarse en incremento de 0,1 mm, ajustar inclinación y balance para simular cirugías.



1503 PA
Articulador de plástico ligero (5)
1504 PA
Articulador de plástico ligero (10)
1505 PA
Articulador de plástico ligero (20)

Accesorio ligero y económico para los articuladores Panadent PCH, PSH y PCF.

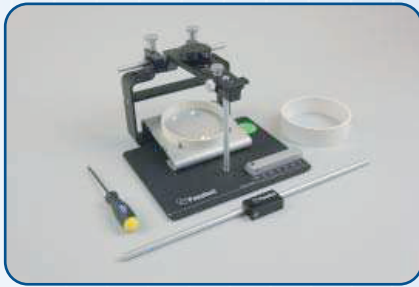


2250 ME
Sistema de montaje de ejes (AMS)
2251 ME
Conjunto de soporte de montaje de eje (Básico)

ideal para montar modelo maxilar en el eje de bisagra y montarlo en el eje promedio (arco auricular). Incluye barra transversal y abrazadera, que se utilizan junto con el arco facial Pana-Mount™ y los brazos de registro de ejes para transferir el modelo del paciente al verdadero eje de la bisagra.



2080 ME
Soporte de montaje mandibular

El soporte de montaje mandibular sostiene el articulador boca abajo para facilitar el montaje del modelo mandibular. La parte frontal del articulador se puede ajustar con el pasador de soporte para nivelar el modelo y evitar que la piedra de montaje se deslice durante el procedimiento.

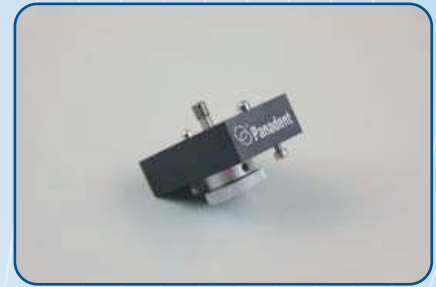

2479 ME
Conjunto espaciador de montaje de placa mandibular

El espaciador se acopla al marco mandibular del articulador Panadent "H" (modelo alto) para convertirlo en compatible con el articulador modelo "L", ahora descatalogado.




2870 ME
Soporte de horquilla para mordida (magnético)

El sistema de soporte de horquilla para mordida fue desarrollado para crear una plataforma robusta que facilite el uso del método de soporte de la horquilla de mordida durante los procedimientos de montaje en el articulador magnético.



2876 ME
Soporte de horquilla para mordida (Atornillable)

El sistema de soporte para horquilla de mordida fue desarrollado para crear una plataforma robusta que facilite el uso del método de soporte de la horquilla de mordida durante los procedimientos de montaje en el articulador de tornillo.

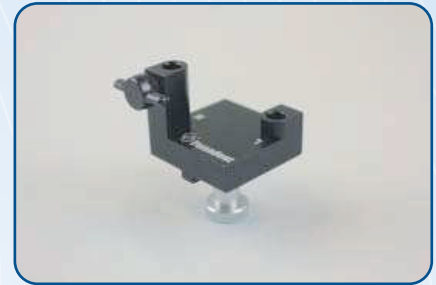

4054 ME
Accesorio de montaje (bajo/alto)

El dispositivo de montaje se utiliza con el arco facial Pana-Mount™ para indexar el conjunto de horquillas de mordida en el articulador. El dispositivo es compatible con los articuladores Panadent de modelo bajo (L) o alto (H).

PLATOS PARA MONTAJE



2850 MP
Sistema Magna-Split™ II

Incluye:
2-2804 MP
Placa de montaje Magna-Split™
1-2860 MP
Placas de índice Magna-Split™ (20)

Este sistema de placas de montaje magnético se utiliza con el articulador PCH o PSH. Incluye imanes de neodimio extraíbles y tornillos de acero inoxidable para fijar la placa a los bastidores superior e inferior del articulador.



2860 MP
Placas de índice Magna-Split™ (20)
2861 MP
Placas de índice Magna-Split™ (50)
2862 MP
Placas de índice Magna-Split™ (100)

Estas placas de índice de plástico preformadas se fijan directamente a la placa de montaje Magna-Split™ para facilitar el montaje de moldes de estudio y pueden utilizarse con nuestro Articulador PAL™ de plástico Lite.



2804 MP
Placa de montaje Magna-Split™

La placa de montaje incluye un imán de tierras raras extraíble y dos tornillos de acero inoxidable para fijarla al bastidor superior o inferior del articulador o del sistema de montaje de ejes.

(La imagen muestra el imán colocado).



2852 MP
Placas de índice Magna-Split™ Old Style (20)
2853 MP
Placas de índice Magna-Split™ Old Style (50)
2854 MP
Placas de índice Magna-Split™ Old Style (100)

Estas placas índice de plástico preformadas se fijan directamente a la placa de montaje Magna-Split™ para un montaje rápido y sencillo de los moldes de estudio.



2706 MP
Placa de montaje de plástico (10)
2707 MP
Placa de montaje de plástico (20)
2708 MP
Placa de montaje de plástico (50)

Estas placas de montaje de plástico son placas de montaje estándar con ajuste por tornillos.

Se pueden usar con varias marcas de articuladores.

Face-Bow & ACCESORIOS



4000 FB
Pana-Mount™ Face-Bow

El arco facial Pana-Mount™ cuenta con horquillas de mordida desmontables, lo que permite utilizar el arco facial en varios pacientes sin necesidad de colocar los moldes inmediatamente. También incluye Relator Nasion estándar de 22 mm y puntero orbital. Las almohadillas para orejas y Almohadilla Nasion de espuma aumentan la comodidad del paciente.

Incluye:

Arco facial, dos conjuntos completos de horquillas de mordida, soporte de montaje, Relator Nasion estándar, tornillos en T y llave hexagonal.



4070 FB
Medidor de nivel Bio-Esthetic™

El calibrador de nivel Bio-Esthetic™ se utiliza para nivelar el arco facial horizontalmente para que el plano estético anterior de los dientes pueda establecerse correctamente en el articulador.



4027 FB
Conjunto horquilla de mordida (completo)

El conjunto se utiliza con el arco facial Pana-Mount™ y viene completo con una horquilla de mordida y un vástago estándar, así como tornillos en T.



4028 FB
Horquilla de mordida (regular)

La horquilla estándar se utiliza con el soporte facial Pana-Mount™ y el vástago del tenedor. Fabricado completamente en acero inoxidable, está diseñado para facilitar su limpieza y esterilización.



4080 FB
Relator Nasion ajustable

Ajustable y se utiliza junto con el calibrador de nivelación Bio-Esthetic™ permite nivelar el arco facial en el plano sagital cuando la cabeza del paciente está erguida. Viene calibrado en milímetros.



4030 FB
Conjunto de vástago de horquilla de mordida (Solo)

Sirve para fijar la horquilla al arco facial Pana-Mount™. Es el mismo conjunto que el artículo **4027**, sin horquilla de mordida. Incluye tornillos en T.

4037 FB
Horquilla de mordida (dentadura completa)

Ideal para prótesis completa, se utiliza con el conjunto de arco facial y vástago de horquilla Pana-Mount™ para transferir el borde de mordida maxilar y el modelo edéntulo al articulador.

4038 FB
Horquilla de mordida (Pediátrico)

La horquilla pediátrica se utiliza con el soporte facial Pana-Mount™ y el vástago del tenedor de mordida.

*Todas las horquillas están fabricadas en acero inoxidable y están diseñadas para facilitar su limpieza y esterilización.

Sistema de Análisis DENTO-FACIAL KOIS



4300 KS

Sistema de Análisis Dento-Facial Koís

Registra y transfiere el plano oclusal del paciente en tres ejes espaciales al articulador, en relación a una distancia incisal-axial promedio de 100 mm.

Incluye:

4305 KS

Analizador Dento-Facial Koís

4360 KS

Plataforma ajustable Koís



2804 MP

Placa de montaje Magna-Split™

La placa de montaje incluye un imán de tierras raras extraíble y dos tornillos de acero inoxidable para fijarla al bastidor superior o inferior del articulador o del sistema de montaje de ejes.

(La imagen muestra el imán colocado).



2852 MP

Placas de índice Magna-Split™ Old Style (20)

2853 MP

Placas de índice Magna-Split™ Old Style (50)

2854 MP

Placas de índice Magna-Split™ Old Style (100)

Estas placas índice de plástico preformadas se fijan directamente a la placa de montaje Magna-Split™ para un montaje rápido y sencillo de los moldes de estudio.



2706 MP

Placa de montaje de plástico (10)

2707 MP

Placa de montaje de plástico (20)


2708 MP

Placa de montaje de plástico (50)

Estas placas de montaje de plástico son placas de montaje estándar con ajuste por tornillos.

Se pueden usar con varias marcas de articuladores.

Sistema Indicador de Posición DEL CÓNDILO

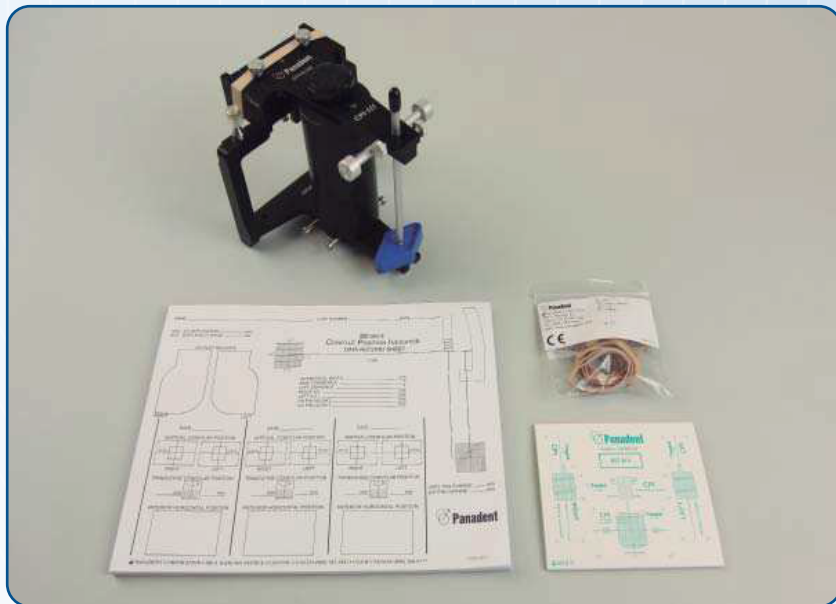

2500 CP
Sistema CPI-III

El Indicador de Posición Condilar (IPC) es un instrumento de precisión que permite el seguimiento de la posición condilar hasta una posición estable durante la terapia con férula oclusal y la determinación de discrepancias de CO/CR (deslizamiento o punto de apoyo). También se puede utilizar para la verificación de registros interoclusales.


Incluye:

Marcos maxilares y mandibulares con columna de soporte, hojas de registro de datos (50), hojas milimetradas (20) y bandas elásticas de soporte (12).




9354 CP
Resolver óptico e iluminador CPI

El Resolver Óptico CPI se utiliza para facilitar la lectura de los pequeños puntos de las posiciones de los ejes en los soportes gráficos. Incorpora una escala ampliada de 1/10 mm y una linterna para una mejor visión.

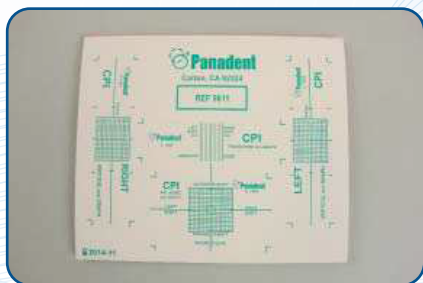

9611 CP
Papel cuadrulado de IPC (20)

Las almohadillas gráficas están impresas en papel adhesivo de fácil desprendimiento para facilitar su colocación y extracción en los soportes. Cada almohadilla cuenta con una cuadrícula milimétrica vertical (sagital) derecha e izquierda, y una cuadrícula horizontal para los cambios del eje condilar lateral.

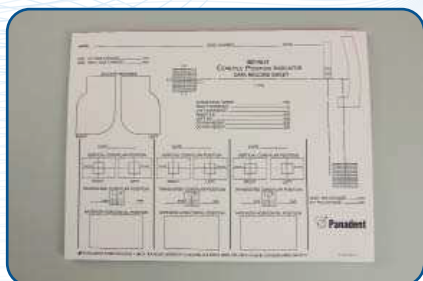

9615 CP
Hoja de registro de datos del IPC (50)

Las Hojas de Registro de Datos se utilizan para almacenar los papeles milimetrados usados en una hoja organizada para una rápida consulta. Se pueden colocar tres lecturas de CPI y un registro de trayectoria axial en una hoja (8 1/2 x 11).

Grabadoras y accesorios AXI-PATH



7600 AP

Grabador Axi-Path III


El Axi-Path III permite un registro preciso del eje transversal y de las trayectorias protrusiva y Bennett para seleccionar el Motion Analog adecuado.

El Axi-Path es un registrador pana-digital que permite documentar de forma rápida y precisa los movimientos mandibulares en el eje transversal.

7501 AP

Grabador Axi-Path II

El Axi-Path II es igual al Axi-Path III, pero utiliza brazos de registro con ajuste macro por fricción (E-Z Find) para una localización del eje más simple y rápida.

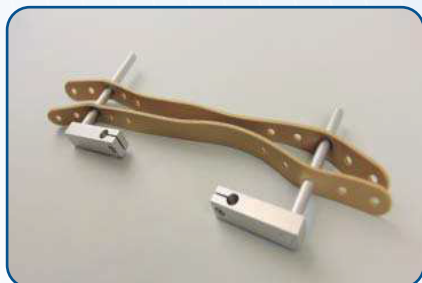

7040 AP

Estabilizador de edéntulos


Se utilizan con el registrador Axi-Path II y Axi-Path III. Se fijan a la varilla transversal para sujetar el embrague desechable sobre el reborde edéntulo durante el procedimiento de registro.



7691 AP

Clutches Desechables

Se utilizan con el registrador Axi-Path. Cada clutch incluye tres deflectores de diferentes tamaños. El operador puede acortarlos para que un solo tamaño se adapte a todos.

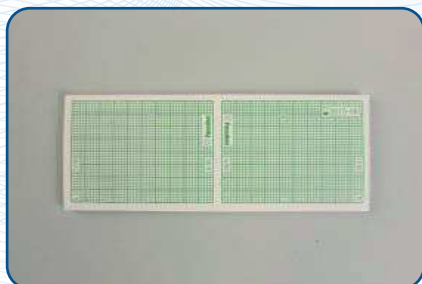

7685 AP

Papel para Ejes Gráficos (Set de 20)

Los papeles milimetrados se utilizan con Axi-Path II o III. Las líneas están marcadas en cuadrados de 1 mm, 5 mm y 10 mm.



7686 AP

Tinta para Marcas

Se utiliza para marcar el eje transversal (bisagra) en la piel del paciente para la transferencia del eje del arco facial.